

MEEDIT i6000



**L'odontoiatria digitale
nelle tue mani**

Il più semplice Il più agevole

Acquisisci il controllo totale con un solo clic.
Collega e scansiona in modo semplice utilizzando
un solo cavo per il collegamento diretto con un PC.

Puntale
reversibile a
180°



Pulsante di avvio
della scansione



Cavo
rimovibile



Straordinaria esperienza di scansione

Leggero,

Soli 245g di peso, con un'impugnatura realizzata per avere la massima comodità.

Fluidi,

La velocità migliorata e le immagini ottimali offrono un'esperienza di scansione più fluida con colori vivaci tramite il nuovo sistema ottico utilizzato nel Medit i700.

La mente dell'i700 con una nota di colore

Incredibilmente accurato

Il flusso di lavoro digitale inizia con dati accurati. Medit i600 acquisisce i dati in modo preciso, per una comoda esperienza di odontoiatria digitale.

***Elevata accuratezza**

Accuratezza dell'arcata completa: $10.9 \mu\text{m} \pm 0.98$

*Acquisisce dati di scansione accurati dal quadrante anteriore alla superficie occlusale.

Guarda com'è facile

Medit i600 può essere collegato direttamente al PC (Fig. 1 e 2), eliminando le limitazioni dei dispositivi cablati tra le poltrone e gli studi per una più ampia portata del trattamento tramite scanner.

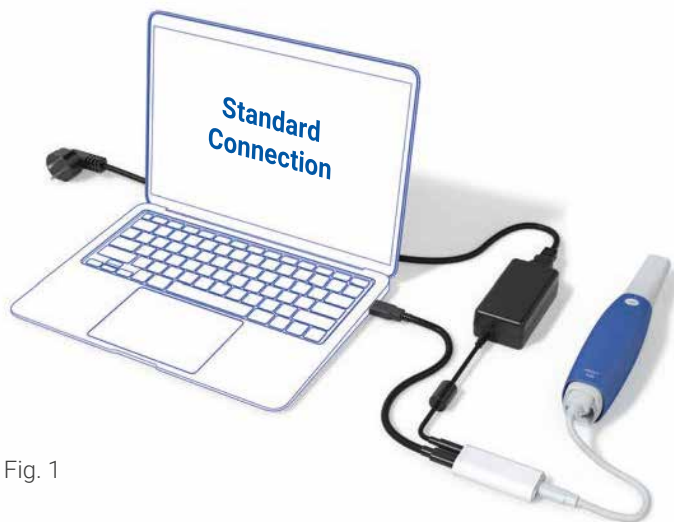


Fig. 1



Fig. 2



Area di scansione più ampia (rispetto all'i500)

Un'area di scansione più ampia (15x13mm) acquisisce più dati in un solo passaggio, per un'esperienza di scansione più agevole.

 i600	 i500
15x13 mm	14x13 mm

Semplice scansione

Sperimenta una straordinaria acquisizione di dati digitalizzati con Medit Scan for Clinics. La tecnologia di un software all'avanguardia rende la scansione piu comoda.



Otteni il massimo dai dati di scansione grazie alle soluzioni software intelligenti.

Guida scansione intelligente

La guida utente potenziata fornisce assistenza per eventuali anomalie rilevate in fase di scansione.

Filtro scansione intelligente

Le prestazioni di filtraggio automatico migliorate facilitano il processo di scansione filtrando i tessuti molli come labbra, guance e lingua

Filtro colore intelligente

Filtra automaticamente i colori registrati, come quello dei guanti medicali, durante la scansione.

Cucitura intelligente

Scansiona con la tua personale strategia. I dati frammentati vengono allineati con l'area comune rilevata automaticamente.

Pazienti più soddisfatti

Il trattamento con dati accurati e la consultazione tramite le immagini 3D contribuiscono a migliorare la soddisfazione per il protocollo digitale e in generale dell'esperienza odontoiatrica.

Aumenta la produttività sulla poltrona

Non dovrai più preoccuparti del costo aggiuntivo derivante dall'utilizzo di programmi e sistemi complessi! L'eterogeneità delle app Medit rende il trattamento più agevole, semplice e comodo!



Specifiche

Categoria		Medit i600
Scanning Technology	Frame di scansione	Fino a 35 FPS
	Tecnologia di imaging	Tecnologia video 3D in motion Acquisizione streaming 3D full color
	Sorgente LED	LED
	Tecnologia anti-appannamento	Anti-appannamento adattativo
Accuratezza	Arcata completa	10.9µm ± 0.98
Manipolo	Dimensioni	248 x 44 x 47.4 mm
	Peso totale	245 g
Puntale	Dimensioni del puntale	22.2 x 15.9 mm
	Area di scansione	15 x 13 mm
	Autoclavabile	Autoclave 100 volte 121°C 30 mins 134°C 4 mins (tipologia pre-vuoto) 135°C 10 mins (tipologia gravità)
	Puntale reversibile	Sì
Modalità speciale	Modalità controllo remoto	No
	Disinfezione UV-C	No
Connettività		USB 3.1 Gen1

- Le prestazioni possono variare a seconda delle specifiche del PC
- Test di accuratezza dello scanner i600 a cura del dipartimento R&D Medit

Distribuito da:



Via VIII Marzo, 9 - 22046 Merone (CO)
Tel.: 031.656763 - Fax 031.655324
info@megagenitalia.it

www.megagenitalia.it

MEDIT 1600